

Научно-производственное предприятие «ТОМЬАНАЛИТ»
Общество с ограниченной ответственностью «ЛаМО»

ПЛИТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
СЕРИИ ПРН

**ПЛИТА НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ
ПРН-3050-2.2**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУ 3443-031-59681863-2015



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПЛИТЫ	2
1.1 Назначение и область применения	3
1.2 Комплектность	3
1.3 Технические характеристики	3
1.4 Устройство и принцип работы	4
1.5 Маркировка	5
1.6 Упаковка	6
1.7 Правила и условия безопасной эксплуатации	6
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛИТЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	7
2.1 Эксплуатационные ограничения	7
2.2 Установка и подключение плиты	8
2.3 Включение плиты	8
2.4 Выключение плиты	8
2.5 Порядок работы	9
3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	9
4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	10
4.1 Хранение	10
4.2 Транспортирование	10
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	10
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	11
7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	11

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, правил использования, технического обслуживания, транспортирования и хранения плиты нагревательной лабораторной со стеклокерамической поверхностью ПРН-2050-2.2 (далее – плита). Плита является одной из модификаций плит нагревательных лабораторных со стеклокерамической поверхностью серии ПРН: модификацией с двумя секциями нагрева.

Руководство по эксплуатации является объединенным документом с паспортом изделия.

Внимание! Прежде, чем приступить к работе с плитой, необходимо подробно и внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. Правила и условия безопасной эксплуатации плиты изложены в пункте 1.7; эксплуатационные ограничения – в пункте 2.1 настоящего руководства.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему плиты изменения, не влияющие на технические характеристики, без изменения эксплуатационной документации.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПЛИТЫ

1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Плита предназначена для нагрева, поддержания в нагретом состоянии, выпаривания и высушивания растворов, смесей, проб и образцов.

1.1.2 Плита является вспомогательным лабораторным оборудованием и не подлежит аттестации и поверке.

1.1.3 Плита может быть использована в аналитических, испытательных, сертификационных, научно–исследовательских и других лабораториях и центрах.

1.1.4 Рабочими условиями применения плиты являются:

- температура окружающего воздуха, °С: от 10 до 35;
- относительная влажность при 25°С, %: от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа: от 84 до 106,7;
- напряжение питающей сети, В(230 ± 23);
- частота питающей сети, Гц(50 ± 1).

1.2 Комплектность

1.2.1 Комплект поставки плиты приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт.
1 Плита ПРН-3050-2.2	1
2 Соединитель типа РШ/ВШ30	1
3 Руководство по эксплуатации	1

1.2.2 Плита поставляется с двумя установленными предохранителями типа «Вставка плавкая цилиндрическая 6х30 15А».

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Максимальная температура нагрева поверхности: не менее 450 °С.

1.3.2 Время разогрева поверхности секций нагрева до 450 °С: не более 15 мин.

1.3.3 Количество независимых секций нагрева: 2 шт.

1.3.4 Габаритные размеры, не более:

плиты - 500х390х115 мм;

стеклокерамической поверхности - 500х300 мм;

секции нагрева А - 220х240 мм;

секции нагрева В - 220х240 мм.

1.3.5 Масса, не более: 6 кг.

1.3.6 Питание плиты осуществляется от 1-фазной сети переменного тока напряжением (230 ± 23) В частотой (50 ± 1) Гц.

1.3.7 Потребляемая мощность, не более: 3 кВт

1.3.8 Сопротивление изоляции цепей, не менее: 20 МОм.


1.3.9 Средний срок службы, не менее: 3 года.

1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Плита содержит стеклокерамическую нагревательную поверхность, имеющую две секции нагрева: секцию нагрева А (далее – секция А) и секцию нагрева В (далее – секция В). Секции А и В имеют одинаковую площадь поверхности и равнозначны по функциональному назначению.

1.4.2 Вид плиты спереди представлен на рис.1.

Плита конструктивно представляет собой корпус 1 из коррозионностойкой стали, внутри которого расположены один плоский нагреватель для секции А и один плоский нагреватель для секции В. Нагреватели для секций А и В могут работать как отдельно, так и одновременно. Сверху нагреватели покрыты листом стеклокерамики, снизу нагреватели закрыты съемным защитным экраном. На лицевой части корпуса расположен блок управления 2, внутри которого размещены элементы питания, управления и коммутации. На блоке управления расположены элементы индикации и управления нагревом секции А (слева) и секции В (справа): 3 - индикатор режима нагрева секции А; 4 - индикатор режима нагрева секции В; 5 - ручка управления мощностью нагрева поверхности секции А; 6 - ручка управления мощностью нагрева поверхности секции В.

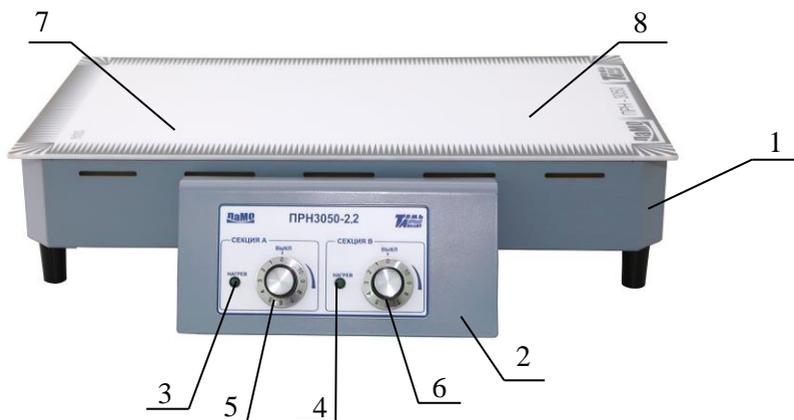


- 1 – корпус; 2 - блок управления;
 3 - индикатор режима нагрева секции А;
 4 - индикатор режима нагрева секции В;
 5 - ручка управления мощностью нагрева поверхности секции А;
 6 - ручка управления мощностью нагрева поверхности секции В;
 7 - секция нагрева А; 8 - секция нагрева В.

Рисунок 1 – Плита нагревательная лабораторная ПРН-3050-2.2
 (вид спереди)

1.4.3 Вид плиты сзади представлен на рис.2. На задней панели плиты расположены кабельный ввод с выводом сетевого кабеля 1 и два держателя предохранителей 2.

1.4.4 Включение и задание температур поверхностей секций нагрева осуществляется с помощью ручек управления. При повороте ручки управления выбранной секции от нуля до требуемого значения подается питание на блок управления; нагреватель секции начинает работать в режиме задания мощности согласно установленному значению. При этом индикатор нагрева выбранной секции мигает с интервалом, соответствующим заданной мощности.

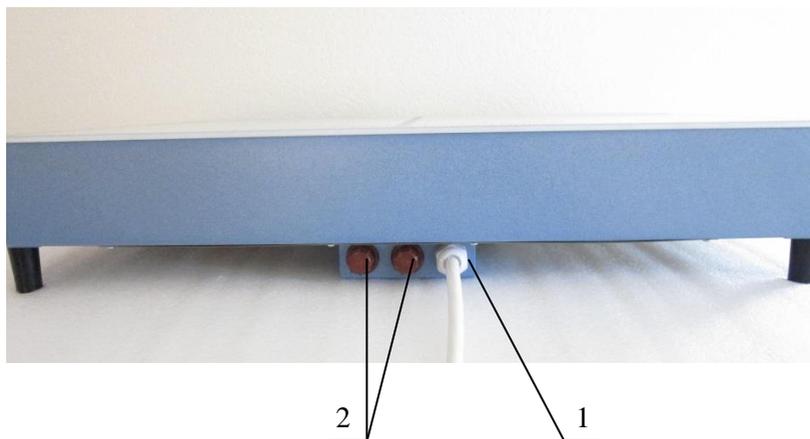

1 - кабельный ввод с выводом сетевого кабеля;
2 - держатель предохранителя.

Рисунок 2 – Плита нагревательная лабораторная ПРН-3050-2.2 (вид сзади)

1.5 Маркировка

1.5.1 Основная маркировка расположена на нижней части блока управления плиты и содержит:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и номер плиты по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год выпуска;
- обозначение ТУ.

1.5.2 На лицевой панели блока управления отображены:

- название изделия;
- логотипы предприятий-изготовителей и разработчиков.

1.5.3 На органах управления блока управления (или вблизи них) нанесены надписи и обозначения, указывающие назначение этих органов:

- «СЕКЦИЯ А»: расположение органов управления и индикации работы секции А;

- «СЕКЦИЯ В»: расположение органов управления и индикации работы секции В;

- «НАГРЕВ»: индикатор нагрева секции;

- «ВЫКЛ», «|»: указатель установленной мощности нагрева поверхности секции;

- «**▲**»: указатель направления регулирования мощности нагрева поверхности секции.

1.5.4 На стеклокерамическую поверхность нанесены:

- логотипы предприятий-изготовителей и разработчиков;

- «СЕКЦИЯ А»: расположение секции нагрева А;

- «СЕКЦИЯ В»: расположение секции нагрева В.

1.6 Упаковка

1.6.1 Плита упаковывается в фанерную коробку.

1.6.2 Документация упаковывается в полиэтиленовый пакет и помещается в коробку вместе с плитой.

1.6.3 Коробка с упакованным изделием оклеивается лентой на клеевой основе по ГОСТ 20477-86. На верхнюю сторону коробки наносится надпись «ВЕРХ».

1.7 Правила и условия безопасной эксплуатации

1.7.1 Перед началом работы с плитой внимательно изучите данное руководство по эксплуатации до конца.

1.7.2 Руководство по эксплуатации должно храниться в доступном месте.

1.7.3 Соблюдайте все инструкции по безопасности на рабочем месте, правила и требования производственной гигиены труда.

1.7.4 Не касайтесь нагревательной поверхности при ее нагреве и остывании.

1.7.5 Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с категорией опасности обрабатываемого материала, так как существует риск выбросов, испарения и разбрызгивания жидкостей, испарения токсичных или взрывоопасных газов.

1.7.6 Перед включением проверяйте плиту на наличие повреждений. Не используйте поврежденное оборудование.

1.7.7 Не нагревайте материалы и пробы, чья температура воспламенения ниже 400 °С.

1.7.8 Учитывайте опасности, связанные с легковоспламеняющимися материалами, взрывоопасными материалами с низкой точкой кипения, повреждением стекла, перегревом материалов.

1.7.9 Розетка электрической сети, в которую включается плита, должна иметь заземление.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛИТЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 К работе с плитой допускаются лица, изучившие настоящее руководство и имеющие I группу по электробезопасности («Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»).

2.1.2 Во время проведения профилактических работ и при эксплуатации плиты необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.1.3 Вблизи установки плиты не должно находиться легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

2.1.4 Заземление корпуса плиты осуществляется через заземляющий контакт соединителя РШ30.

2.1.5 При использовании плиты по назначению должны соблюдаться требования безопасности, предусмотренные основными правилами безопасности работы в химической лаборатории.

2.1.6 В случае разлива жидкости на нагретую стеклокерамическую поверхность немедленно выключить плиту, выкрутив ручки регуляторов влево до упора и вынув питающий провод из розетки; после полного охлаждения устройства удалить следы разлива.

ВНИМАНИЕ!

1 Во избежание разрушения стеклокерамической поверхности не допускается ставить на разогретую стеклокерамическую поверхность холодные, мокрые и грязные предметы, а также подвергать стеклокерамическую поверхность физическому воздействию (ударять, ронять на стеклокерамическую поверхность любые предметы и т.д.), т.к. при последующем нагреве возможно образование трещин стеклокерамики.

2 Эксплуатация плиты с потрескавшейся или лопнувшей стеклокерамической поверхностью во избежание поражения электрическим током обслуживающего персонала СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА!

Невыполнение условий п. 2.1 может привести к выходу плиты из строя, гарантийное обслуживание в этом случае не осуществляется.

2.2 Установка и подключение плиты

2.2.1 Плита устанавливается в вытяжной шкаф или на лабораторный стол, поверхность которого должна быть выполнена из негорючих материалов. Поверхность вытяжного шкафа или лабораторного стола, на которую устанавливается плита, должна быть чистой и сухой.

2.2.2 В непосредственной близости от плиты не должно находиться легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов и веществ.

2.2.3 Подключение плиты к питающей сети производится штатным шнуром питания.

2.3 Включение плиты

2.3.1 Перед началом эксплуатации плиты следует убедиться в целостности питающего кабеля, наличии и исправности предохранителей, отсутствии трещин, сколов и разломов стеклокерамики.

2.3.2 Перед включением плиты ручки управления нагрева обеих секций должны находиться в конечном положении, т.е. повернуты против часовой стрелки до упора, при этом «0» значение на шкале ручки должно совпадать с меткой «ВЫКЛ».

2.3.3 Поворачивают ручку управления мощностью нагрева выбранной секции по часовой стрелке в положение требуемой мощности. Загорится индикатор режима нагрева соответствующей секции на блоке управления. Плита начнет нагреваться.

2.4 Выключение плиты

Поворачивают обе ручки управления мощностью нагрева против часовой стрелки в конечное положение, при этом «0» значение на шкале ручек должно совпасть с меткой «ВЫКЛ».

2.5 Порядок работы

2.5.1 Устанавливают на выбранную секцию чистую и сухую термостойкую лабораторную посуду (колбу, химстакан) с требуемыми для нагрева растворами или другими объектами.

2.5.2 Для начала работы плиты поворачивают ручку управления включаемой секции в положение требуемой мощности. Секция начнет нагреваться. Индикатор нагрева включенной секции будет мигать с интервалом, соответствующим выбранной мощности.

2.5.3 По окончании работы выключают плиту.

3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

3.1 К ремонту плиты допускается квалифицированный персонал. При ремонте плиты следует принимать меры безопасности в соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2 Перечень некоторых наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей плиты, их признаки и способы устранения приведен в таблице 3. Другие неисправности устраняются на предприятии-изготовителе или его представителями.

Таблица 3

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятные причины	Способ устранения
Поверхность плиты не нагревается.	1 Отсутствует сетевое питание. 2 Поврежден сетевой шнур.	1 Проверить наличие сетевого питания. 2 Заменить сетевой шнур на исправный.
Индикатор на блоке управления мигает 1 раз в секунду, нагрев не производится.	Сработала тепловая защита силовых ключей.	1 Выключить плиту, дождаться остывания блока управления, затем включить снова. 2 Обеспечить требуемый температурный режим с помощью принудительного охлаждения блока управления.

Окончание таблицы 3

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятные причины	Способ устранения
Секция работает на полную мощность, на ручку управления регулятора не реагирует.	Нарушение контакта в разъеме шлейфа регулятора мощности	Проверить контакт в разъеме шлейфа регулятора мощности.

4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 ХРАНЕНИЕ

4.1.1 Плиту до ввода в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 %.

4.1.2 Плиту без упаковки следует хранить при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности 80 %.

4.1.3 В помещении для хранения не должно быть паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

4.2 Транспортирование

Транспортирование плиты можно производить всеми видами крытого транспорта по условиям хранения 3 ГОСТ 15150-69.

5 Свидетельство о приемке

Плита нагревательная лабораторная со стеклокерамической поверхностью ПРН-3050-2.2 заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ 3443-031-59681863-2015 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.

Представитель ОТК _____ / _____
Подпись МП

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие плиты нагревательной лабораторной ПРН-3050-2.2 требованиям ТУ 3443–031–59681863–2015 при соблюдении потребителем правил и условий установки, эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается со дня ввода плиты в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня выпуска из производства.

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за дефекты, появившиеся:

- в результате нарушения правил хранения и транспортировки;
- в результате нарушения правил установки и эксплуатации;
- после гарантийного срока.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При неисправности плиты в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт с указанием признаков неисправностей плиты.

Акт с указанием точного адреса и номером контактного телефона потребителя высылается предприятию-изготовителю по указанному ниже адресу.

ООО «НПП «Томьаналит»

634021, г.Томск, пр. Фрунзе 240а, стр.14;

тел./факс: (3822) 902-912 (многоканальный); e-mail: ta@tomanalyt.ru.

ООО «ЛаМО»

192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 14, лит. А;

тел./факс: (812) 622-17-66; e-mail: info@lamo-spb.ru.